




La bilancia a ultrasuoni per fitness e salute MUW 300L, elegante e durevole, è ideale per calcolo di altezza, peso e indice di massa corporea (IMC) in studi e palestre. La bilancia MUW semplifica la raccolta dei dati eliminando le procedure manuali, che spesso portano a risultati inesatti. Facile da usare, la bilancia consente agli utenti di misurare con rapidità e precisione altezza e peso senza alcun contatto fisico con il soggetto. La MUW 300L presenta una robusta base in ghisa e colonna in alluminio, mentre i piedini in gomma forniscono sicurezza e stabilità. Un luminoso display a LCD retroilluminato mostra altezza, peso e indice di massa corporea tutto in una schermata, eliminando la necessità di scorrere le letture. Ruote e funzionamento a batteria rendono la bilancia facile da usare e spostare ovunque la pesatura del paziente sia necessaria.

## Bilancia a ultrasuoni elegante calcola senza sforzo altezza, peso e IMC

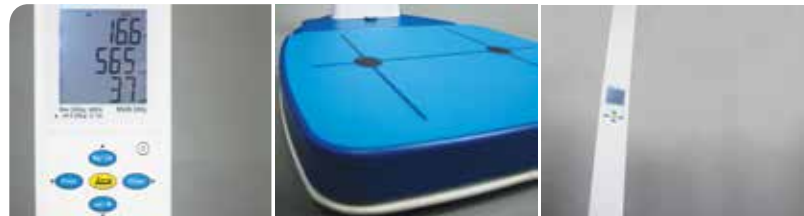

### Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- Calcolo automatico dell'altezza tramite sensori ad ultrasuoni per misurazioni di precisione
- Il tabulato può comprendere l'ID di un paziente e del medico ed anche le misurazioni dell'IMC
- La lettura di altezza può essere convertita da centimetri a pollici
- Misurazioni dell'altezza a ultrasuoni da 80 cm a 210 cm
- Piattaforma antiscivolo garantisce sicurezza quando si sale e scende dalla bilancia
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Ruote integrate che consentono un facile movimento
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Indicatore IMC (indice di massa corporea)
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Adattatore AC incluso
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo

### Applicazioni

- Pesatura
- Indicatore IMC (indice di massa corporea)
- Misurazione Dell'altezza

### Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	MUW 300L
Capacita'	300kg
Precisione	0.05kg
Ripetibilita' (S.D.)	0.05kg
Linearita' (+/-)	0.1kg
Dimensione piatto	375x375mm
Unita' di misura	kg, lb, lb:oz
Tempo di stabilizzazione (sec)	2
Interfaccia	RS-232
Indice di Massa Corporea [IMC]	Si
Asta per l'altezza	Si
Calibratura	Calibratura esterna
Visulazzazione	LCD retroilluminato con caratteri 17mm alti
Alimentazione	Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria ricaricabile interna
Temperatura di esercizio	0° a 40°C
Custodia	Struttura di acciaio leggero
Dimensioni totali	375x600x2320mm (lpxh)
Peso netto	21.7kg

## Accessori

Numero dell'unita' .....	Descrizione
3126011263 .....	Carta termica per stampante ATP
3126011281 .....	Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
1120011156 .....	Stampante termica di ATP
3014011014 .....	Cavo RS-232
3074010507 .....	Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
700660290 .....	Certificato di calibratura

## Accessori Principali



**Stampante termica di ATP**  
Le funzioni di facile utilizzo della stampante termica ADAM combinate con una impostazione rapida offrono una stampatura termica veramente versatile. Un singolo pulsante di introduzione dati e tre indicatori LED di facile lettura permettono un funzionamento semplificato.

Consegnato da