




Alta capacidad y legibilidad excepcional: los laboratorios exigentes pueden tener lo mejor de dos mundos con la serie ABL de Adam Equipment. El pesaje repetitivo de muestras se vuelve menos engorroso con la operación simple de la serie ABL, y los resultados son claramente visibles en la pantalla retroiluminada. Una base de datos incorporada almacena hasta 99 recetas, incluyendo 20 ingredientes o pasos para cada receta. Los resultados se guardan fácilmente a través de la interfaz RS232, mientras que las impresiones compatibles con GLP contienen datos y hora. Con la función de pesaje por debajo de la balanza, la ABL puede realizar la determinación de la densidad y la medición de la gravedad específica. La serie ABL cuenta con calibración interna estándar, para la calibración automática cuando es necesario.

Precisión de legibilidad, capacidad avanzada - rendimiento sin compromisos

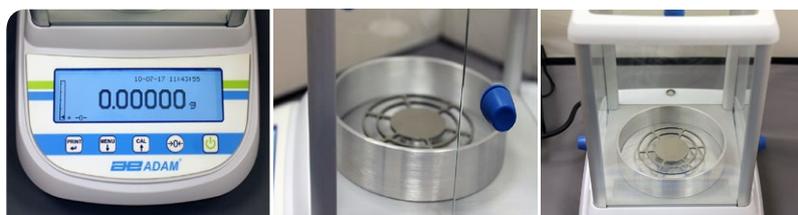

Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima para optimizar los resultados de pesaje
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
- Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Impresiones incluyen fecha, hora de los datos de seguimiento dentro de las directrices de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)
- Recuneto de piezas con tamaños de muestra predeterminados
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Adaptador de CA incluido

Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico/ de animales
- Determinación de la densidad
- Función de retención
- Acumulación de Peso
- Formulation

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	ABL 125	ABL 225
Capacidad	42g / 120g	82g / 220g
Legibilidad	0.01mg / 0.1mg	0.01mg / 0.1mg
Repetibilidad (S.D.)	0.025mg / 0.15mg	0.05mg / 0.15mg
Linealidad (+/-)	0.05mg / 0.2mg	0.1mg / 0.2mg
Tamaño del plato	80mm ø	
Unidades de medida	mg, g	
Tiempo de estabilización (sec)	6	
Interfaz	RS-232	
Calibración	Calibración Interna Automática	
Pantalla	Graphic display	
Alimentación de corriente	24V 50/60Hz 500mA adapter	
Temperatura de operación	15° to 30°C	
Carcasa	ABS	
Cabina	Cámara 171x162x225mm	
Dimensiones totales	215x345x345mm (axpxa)	
Peso Neto	7kg	

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
3074010266	Cable RS-232 (Tipo de módem nulo)
3074010507.....	Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
1120011156	Impresora térmica Adam ATP
104008036	Mesa anti-vibración
3126011263	Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281.....	Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
700660290	Certificado de Calibración

Características principales



Impresora térmica Adam ATP

Características fáciles de usar en combinación con una configuración rápida resulta en una impresora térmica verdaderamente versátil. Un solo botón de alimentación y tres indicadores LED fáciles de leer permiten una simple operación.

Suministrados por